

HPLC 消耗品

ProteCol™ ユニオン、フェルルール&フィッティング

Perfect Connections, Every Time

- ・ ピークの広がり防止するゼロデットボリウムデザイン
- ・ 取り扱いが簡単
- ・ 完璧な多用途性 - 異なるサイズのチューブの接続が可能です
- ・ PEEK™製とステンレス製を準備しています。

PEEK™製とステンレス製ユニオン


ProteCol™ユニオンは、PEEK™製とステンレス製のどちらもすべてのサイズで利用できます。またどちらも再使用できるPEEK™フェルルールを使用します。

- ・ ステンレス製ユニオンは手締めでの固定、もしくは高圧のアプリケーションのための3/16"レンチでの締め付けが出来ます。
- ・ PEEK™製ユニオンは手締めでの固定ができます。またサイズはステンレス製ユニオンより若干大きめのサイズですが、軽いため接続するチューブへのストレスを低減します。

接続性

ProteCol™ユニオンは再利用できるPEEKフェルルールを使用することにより、下記のサイズのチューブを組み合わせて接続することができます。

- ・ 1/32" PEEKsil™チューブ
- ・ 1/16" PEEKsil™チューブ
- ・ 0.36mmフューズドシリカチューブ

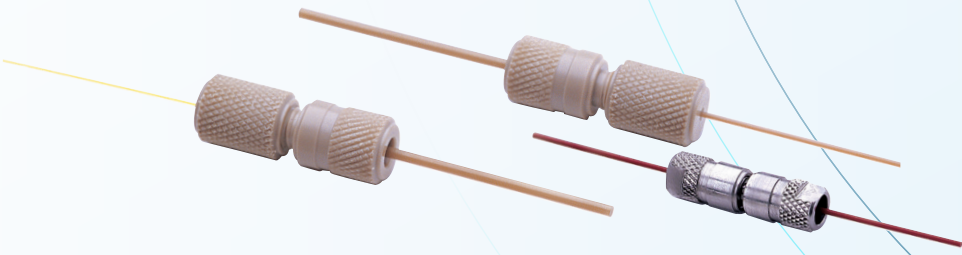

ProteCol™ ステンレスユニオン

詳細	入数	最高耐圧	Part No.	価格
0.36 mm to 0.36 mm	ユニオン×2、PEEK™ フェルルール×4	5,000 psi	222007	¥ 16,000
1/16" to 0.36 mm	ユニオン×2、PEEK™ フェルルール×4		212008	¥ 16,000
1/16" to 1/16"	ユニオン×2、PEEK™ フェルルール×4		212006	¥ 16,000
1/16" to 1/32"	ユニオン×2、PEEK™ フェルルール×4		212007	¥ 16,000
1/32" to 0.36 mm	ユニオン×2、PEEK™ フェルルール×4		222006	¥ 16,000
1/32" to 1/32"	ユニオン×2、PEEK™ フェルルール×4		222005	¥ 16,000



P/N : 222005

ProteCol™ PEEK™ ユニオン

詳細	入数	最高耐圧	Part No.	価格
0.36 mm to 0.36 mm	ユニオン×2、PEEK™ フェルール×4	2,175 psi	222011	¥ 16,000
1/16" to 0.36 mm	ユニオン×2、PEEK™ フェルール×4		212011	¥ 16,000
1/16" to 1/16"	ユニオン×2、PEEK™ フェルール×4		212009	¥ 16,000
1/16" to 1/32"	ユニオン×2、PEEK™ フェルール×4		212010	¥ 16,000
1/32" to 0.36 mm	ユニオン×2、PEEK™ フェルール×4		222010	¥ 16,000
1/32" to 1/32"	ユニオン×2、PEEK™ フェルール×4		222009	¥ 16,000



P/N : 212009

ProteCol™ PEEK™ フェルール

詳細	入数	Part No.	価格
0.36 mm to 0.36 mm	5	223007	¥ 4,000
1/16" to 1/16"	5	213006	¥ 4,000
1/16" to 1/32"	5	213007	¥ 4,000
1/32" to 0.36 mm	5	223006	¥ 4,000
1/32" to 1/32"	5	223005	¥ 4,000



P/N : 223005

PEEK™ Fingertight フィッティング

詳細	入数	最高耐圧	Part No.	価格
1/16" to 10-32UNF	10	5,000 psi	20627520	¥ 14,000
1/32" to 10-32UNF	10	5,000 psi	2220020	¥ 14,000
1/32" to 10-32UNF (long)	10	5,000 psi	20627530	¥ 14,000
1/32" to 6-40UNF	5	2,750 psi	222017	¥ 7,800



P/N : 20627520

EasyLok™ フィッティング


EasyLok™フィッティングは滑り止めの刻みを入れたステンレスナットとPEEK™製のダブルエンドフェルールから構成されています。PEEK™フェルールは単純に1/16"チューブに挿入しスライドさせ手締めで固定ができます。またステンレス製フェルールと違い、チューブを押しつぶさないで簡単に迅速な取り付けや再利用が可能です。PEEK™製ダブルエンドフェルールは2か所をシールができるような設計でリークを防止します。

標準的なHPLC用のメス継手 (Swagelok®, Parker™, Waters®, Valco®, Whatman®) との互換性があります。

SGE製GLTカラムの使用の際にはEasyLok™フィッティングの使用をお勧めします。

仕様	
最高耐圧	5,000 psi
ネジ形式	10-32
最高使用温度	150°C

詳細	入数	Part No.	価格
EasyLok™ フィッティング (フェルール付)	各2	206102	¥ 4,600
PEEK™ ダブルエンドフェルール	10	206160	¥ 6,700

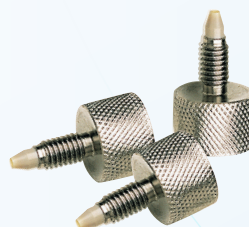

P/N : 206102

● 2018年2月1日現在の情報であり、製品情報、価格等は予告無く変更される場合がございます。掲載価格は希望納入価格（税別）です。



トレイジャン サイエントフィック ジャパン株式会社
〒 231-0011 横浜市中区太田町 6-85RK CUBE 3F
Tel : 045 222 2885 Fax : 045 222 2887
email : japan@trajanscimed.com